

STYLE BIS Bi Matière bleue



Code article : **1020090S4**

Code GTIN : 3615800000654

Famille :
Aides à la marche

Description :
Canne anglaise haut de canne bi-matière poignée bleue, tube aluminium époxy bleu 5015.

Usage revendiqué :
Aide à la marche manipulée avec un bras

Dispositif médical : oui Classe du DM : I

Garantie produit : 2 ans contre tout vice de fabrication

Code identification individuelle LPPR: 6259242
(CANNE METALLIQUE REGLABLE AVEC APPUI ANTEBRACHIAL OU POIGNEE EN T, ACHAT, VILGO)



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Hauteur mini sol / poignée* : 750 mm
- Hauteur maxi sol / poignée* : 975 mm

→ plage de réglage : 225 mm (tous les 25 mm)

* position médiane sur poignée

Tolérances : dimensionnelles 10mm - pondérales 20g

Description technique

- Haut de canne bi-matière en polypropylène, poignée bleue
 - Mât : tube en aluminium Ø 22,5x1 (roulé soudé-5086) – L= 570 mm
2 positions de réglage
 - Rallonge : tube en aluminium Ø 20x1 (roulé soudé-5086) – L=490 mm
5 positions de réglage
 - Finition tubes : époxy bleu 5015
 - Bague anti-jeu entre mât et rallonge
 - Embout anti-bruit
 - Blocage réglage en hauteur par clip
 - Embout Optiflex noir
- Emballage par paire en **poche Vilgo 300x1250**

Poids du produit :

0,54 kg

Date de 1ère mise sur le marché : **Fév 2014**

Version mise sur le marché à partir de : **21/06/2023**

Etiquetage produit




STYLE BIS Bi Matière bleue



Liste des pièces :

N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A102022	1	Haut de Style BI-MAT bleue
2	E102036	1	Mât époxy (tube alu Ø22.5x1- L=570 – 2 trous)
3	A000126	1	Clip de 22.5 noir
4	A000002	1	Bague diam. 22.5 noire
5	E102037	1	Rallonge époxy (tube alu Ø20x1- L=490 – 5 trous)
6	A000134	1	Embout antibuit
7	A102069	1	Embout Optiflex noir

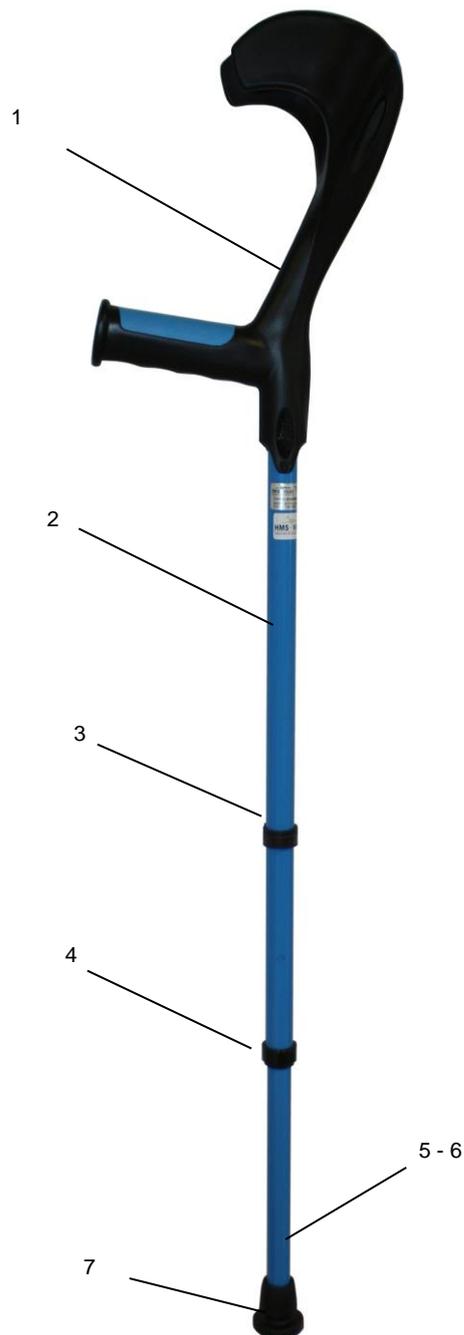

Edition 8 – juin 2023

